

打磨仪

打磨仪——安全卫生、快速处理皮肤和指甲的问题。



洁兰赫打磨仪 — 天狼星



全新升级喷雾打磨仪设备，性能出色，外观精美。

转速范围：2,200 - 42,000转/分钟。

微电机手柄，集成喷雾和照明装置。

手柄重量190克，可顺/逆时针旋转。

控制面板25°倾斜设计，采用2位数字显示当前转速，可设置三个常用转速，

配置喷雾量大小指示灯和设备保养提示灯。

500ml喷雾液可用于65小时持续喷雾。

无线脚踏开关控制(需订购)。

技术参数：

尺寸:	B280*H115*T280 mm
电源:	110 - 220 V/ 50-60 Hz
净重:	2.7kg

	货号
洁兰赫天狼星打磨仪	304 205 511
洁兰赫无线脚踏开关(天狼星专用)	304 204 317

洁兰赫打磨仪 — 月神



全新升级吸气打磨仪设备,性能初色、外观精美。

转速范围:6,000-30,000转/分钟。

吸气量范围:80 - 130升/分钟。

手柄重量150克,可顺/逆时针旋转。

当吸气量为130升/分钟时,噪音为53分贝,3种吸气量选择。

控制面板25°倾斜设计,采用2位数字显示当前转速,配置集尘袋更换提示灯和设备保养提示灯。

打磨仪带有空气过滤装置,避免室内空气污染。

无线脚踏开关控制(需订购)。


技术参数:

尺寸:	B280*H125*T280 mm
电源:	220/240 V/ 50-60 Hz
净重:	3.7kg

	货号
洁兰赫月神打磨仪	304 205 899
洁兰赫无线脚踏开关	304 204 310
洁兰赫集尘袋	704 200 504

足部护理转头

在足部治疗和护理中,会遇到各种皮肤和趾甲问题,需要得心应手的工具来处理。我们将为您提供安全、精密的转头。

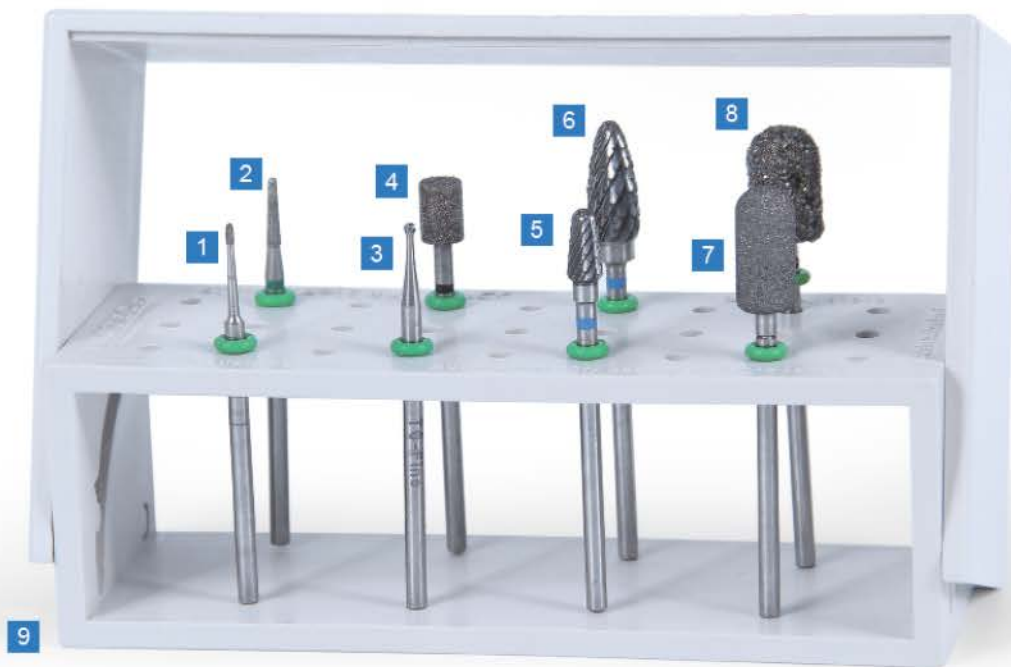

1 金钢石打磨头 D 407H/010

最高转速:50,000转/分钟
用于磨削指甲侧角

4 金钢石打磨头 837 H/ 050

最高转速:40,000转/分钟
用于打磨指甲游离缘和甲面

7 圆头金钢石打磨头 150/070

最高转速:30,000转/分钟
用于磨光皮肤表面

2 金钢石打磨头 850G/018

最高转速:50,000转/分钟
用于打磨甲面和甲皱襞

5 硬质合金转头 HM 75 GX 104 040

最高转速:70,000转/分钟
用于磨削厚甲

8 空心金钢石打磨头 881 PS 104 085

最高转速:15,000转/分钟
用于打磨足底皮肤死皮

3 硬质合金转头HM 141 F/014

最高转速:50,000转/分钟
用于磨削线状和点状指甲和角质

6 硬质合金转头HM 251 GM 060

最高转速:30,000转/分钟
用于磨削厚甲和坚硬的角质表面

9 转头架

基于安全与卫生要求的考虑, 洁兰赫只提供防锈和可消毒的转头。

转头类型、形状及直径大小的选择, 需要根据实际情况和使用习惯而定, 无论操作区是平面还是特定的点, 转头移除物体的能力都是十分重要的, 也就是研磨力。而研磨力主要取决于转速、转头表面的结构和覆盖颗粒的大小, 表面粗糙、颗粒尖锐的转头一般具有较强的研磨力。

转头名称及最大转速	货号	MP
D 407H/010 5000	307 204 000	CE
801G/010 50000	307 140 200	CE ●
407/012 50000	306 204 000	CE
HM 141 F/014 50000	306 240 200	CE
801G/018 50000	307 150 500	CE ●
801G/023 50000	307 150 600	CE
837RG 104 055 粗粒 837R 104 055 中粒 837RF 104 055 细粒 35000	307 225 400 307 255 300 307 255 200	CE CE CE
837 S 104 060 超大粒 837 104 055 中粒 837 F 104 055 细粒 35000	307 172 700 307 172 600 307 172 500	CE CE CE
837 H/050 超大粒 40000	307 141 500	CE ●
879 H/047 超大颗粒 35000	307 142 100	CE
879 S 104 050 超大颗粒 35000	307 173 100	CE
878/060 中粒 50000	307 192 200	CE ●

● 带有此标记的为热销产品。



金刚石转头 (磨头):
用于研磨皮肤表面角质、死皮、胼胝、鸡眼及甲面。

硬质合金转头 (铣刀):
用于磨削坚硬的指甲和胼胝。

操作图示:



指甲侧缘



指甲游离缘



甲周角质

护理转头

转头名称及最大转速	货号	MP
224/018 8000	306 130 600	CE
224/023 8000	306 130 800	CE
224/027 8000	306 131 000	CE
225/014 8000	306 140 600	CE
225/018 8000	306 140 800	CE
225/021 8000	306 141 000	CE
HM 75 GX 104 060 45000	306 250 400	CE ●
HM 75 GX 104 040 70000	306 250 300	CE
HM 251 GM 060 30000	306 251 200	CE
150/070 中粒 30000	307 180 300	CE ●
153/071 粗粒 30000	307 180 400	CE
156/072 粗粒加强 30000	307 181 400	CE
881 PS 104 085 巨大颗粒 15000	307 224 100	CE ●
881 PS 104 095 巨大颗粒 12500	307 224 200	CE
881 PS 104 115 巨大颗粒 10000	307 224 300	CE



鸡眼



足底胼胝



病甲



指尖胼胝



足底胼胝

一次性转头

用于移除死皮、角质及胼胝。一次性转头帽不能够消毒或杀菌，属于一次性用品。

洁兰赫为您提供高级橡胶转头轴，特殊硬化及磁化的不锈钢转轴，可在超声波清洗机中清洗消毒。



	货号
转轴5mm	18 102 046
一次性转头帽 5mm 中粒	18 103 004
一次性转头帽 5mm 粗粒	18 103 005
转轴7mm	18 102 047
一次性转头帽 7mm 中粒	18 103 006
一次性转头帽 7mm 粗粒	18 103 007
转轴10mm	18 102 048
一次性转头帽 10mm 中粒	18 103 008
一次性转头帽 10mm 粗粒	18 103 009
转轴13mm	18 102 049
一次性转头帽 13mm 细粒	18 103 010
一次性转头帽 13mm 中粒	18 103 011
一次性转头帽 13mm 粗粒	18 103 012
转轴16mm	18 102 050
一次性转头帽 16mm 细粒	18 103 013
一次性转头帽 16mm 中粒	18 103 014
一次性转头帽 16mm 粗粒	18 103 015
尖头转轴13mm	18 102 051
一次性尖头转头帽 13mm 中粒	18 103 016
一次性尖头转头帽 13mm 粗粒	18 103 017
尖头转轴16mm	18 102 052
一次性尖头转头帽 16mm 中粒	18 103 018
一次性尖头转头帽 16mm 粗粒	18 103 019

* 转轴价格不含转头帽。
转头帽最小订货量25个。



GT 5 R

41.000




GT 7 R

30.000



处理足底胼胝

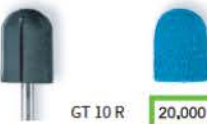

GT 10 R

20.000



GT 13 R

16.000



处理甲周角质



GT 16 R

13.000



GT 13 S

16.000



处理拇指侧胼胝



GT 16 S

13.000

转头架



转头架用于陈列和储存转头的最佳工具。不论是何种转头组合：轻组合、基础组合、糖尿病足组合或指甲组合等都可以一起放在转头架上，挑选使用一目了然。治疗时，只需要把滑盖滑开，就可以方便地取放转头了，是您最佳的转头存放产品。

转头架同样适合转头清洗消毒时使用，只需将滑盖扣好，然后放至超声波清洗机中即可清洗。合闭滑盖时，请确定已将转头架扣牢以避免转头掉落。转头架同样可以用在高温灭菌机或高压灭菌机中消毒。

与器具盒配合使用，出诊时能够有效存放经过清洁消毒的转头。器具盒密封效果良好，其外形根据洁兰赫足护箱的内腔形状精确设计，能够确保器具安全携带。

转头使用完装盒后，只需放半盒消毒清洁液即可。因为在足护箱搬运过程中，将转头头向下，转头即可全部浸入液体中，在晃动过程中得到冲刷。同时由于液体都集中盒子底部，治疗过程中转头拿取也非常方便。

转头架共有27个插孔，使用转头架和器具盒即可创造完美的无尘储存条件，适合存放重要的转头器具。



货号	
转头架	308 119 501